



OR 4Vet

L'imagerie diagnostique
multimodale qui vous inspire.

ORsono portable V11 Un système d'échographie visionnaire

Avec la technologie C-Field+ pour une précision d'image accrue



 **OR Technology**

IMAGERIE DIAGNOSTIQUE INSTANTANÉE.

Le système d'échographie haut de gamme léger offrant une netteté d'image inégalée

Moniteur LCD 15,6"
haute résolution,
antireflet, à réglage
automatique de la
luminosité et offrant
un large angle de vue

Désormais
équipé de la
technologie
révolutionnaire
C-Field+

Longue autonomie :
jusqu'à 90 minutes de
temps de travail

avec indicateur de
niveau de batterie
intégré

**Optimisation
automatique de
l'image** d'une simple
pression sur une
touche

**Fonctionnement
silencieux**
avec contrôle
acoustique

Wi-Fi et
Bluetooth
intégrés
pour une
communication
sans fil

Écran tactile 12,3"
intégré au panneau
de commande,
protégé contre les
éclaboussures
et étanche à la
poussière

Large choix de
sondes

Port de
connexion
avec répartiteur
pour 4 sondes
simultanées

Spécifications de la solution échographique haut de gamme

Données Techniques

Dimensions :

Largeur : env. 390 mm
Hauteur : env. 380 mm
Profondeur : 49,0 mm /
55,5 mm socle compris

Poids :

env. 5,2 kg, batterie incluse

Spécifications de l'appareil

Moniteur haute résolution

- Écran couleur LED 15,6" haute résolution (1920 × 1080) pour des images claires et détaillées
- Antireflet, avec réglage automatique de la luminosité
- Inclinaison de 0° à 180°

Panneau de commande

- Écran tactile 12,3"

Autres composants matériels

- 1 port de sonde, adaptateur pour jusqu'à 4 sondes (en option)
→ L'appareil reconnaît automatiquement la sonde connectée et charge les réglages et configurations prédéfinis spécifiques à l'espèce dans le programme de préréglages.
- Possibilités de connexion pour des dispositifs externes pilotables directement via l'échographe
- Grande mémoire cine pour l'enregistrement et la relecture de séquences d'images
- Conception compacte pour une mobilité maximale
- Fonctionnement sur batterie pour une utilisation flexible sans alimentation secteur, jusqu'à 90 minutes de temps de scan
- Compatible avec les technologies de sondes les plus récentes, avec une plage de fréquences de 1 à 16 MHz

Archivage des images

- 2 To de mémoire interne pour le stockage des images et des données d'examen
- Connexion possible à un PC
- Deux ports USB 2.0 pour sauvegarder facilement les données sur des clés USB ou autres supports
- Standard DICOM (pour l'échange d'images médicales) intégré à l'appareil sans coût supplémentaire





Une nouvelle référence en imagerie diagnostique

Découvrez le futur du diagnostic vétérinaire !

L'ORsono portable V11 est le premier système d'échographie portable au monde basé sur la plateforme révolutionnaire C-Field+ et établit une nouvelle référence en matière de qualité d'image.

Grâce à **une netteté d'image exceptionnelle** et à un traitement des signaux ultra-rapide, il permet des diagnostics en temps réel précis, auxquels vous pouvez faire confiance – partout et à tout moment.

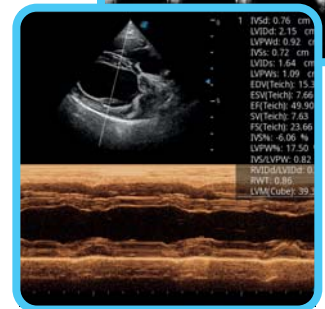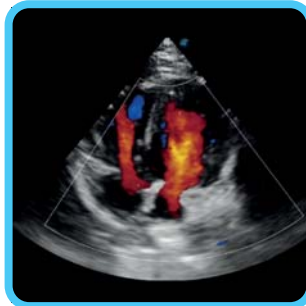

Ergonomie pensée dans les moindres détails

Un assistant intégré guide l'ensemble de l'examen et propose un protocole de scan personnalisable, simplifiant le flux de travail et renforçant la standardisation.

Assistant écho intégré avec images de référence, guides pour une technique de balayage correcte, ainsi que des images et vidéos utilisateurs.

Transmission rapide et pratique des rapports PDF, des images et des boucles vidéo (cine-loops) directement vers le PC.

Un outil de recherche scientifique permet d'analyser les données brutes, augmentant ainsi la flexibilité et l'efficacité du diagnostic.

Connexion Wi-Fi et Bluetooth sans fil pour la mise à jour de vos données (en option)



Sondes disponibles pour la médecine des petits animaux et des équidés

- Sonde linéaire
- Sonde micro-convexe
- Sonde convexe
- Sonde phased-array
- Sonde linéaire intra-rectale

D'autres sondes disponibles sur demande !

Avec le **chariot réglable en hauteur** (en option), vous pouvez transformer le système portable et profiter du confort d'un système mobile.

Logiciel d'échographie professionnel pour la médecine vétérinaire

Utilisation intuitive et diagnostic rapide pour les vétérinaires

Le logiciel spécialement conçu pour les vétérinaires est très simple à utiliser.

Le mode d'examen vétérinaire, flexible et intuitif, permet de sélectionner en un seul clic l'espèce animale, la sonde et les combinaisons de préreglages souhaitées à partir d'une liste.

Interface dédiée pour la saisie des données patient

Le logiciel est spécialement développé pour le secteur vétérinaire et offre une interface conviviale pour la saisie des informations des patients.

Classification des espèces personnalisable

Le logiciel permet aux vétérinaires de définir, dans les paramètres du système, l'espèce animale et l'icône graphique d'examen correspondante pour une application vétérinaire donnée.


Mesures et comptes rendus vétérinaires professionnels

Le logiciel couvre de nombreux domaines d'application, tels que la reproduction, le cœur et l'appareil locomoteur. Il met à disposition tous les outils nécessaires, y compris des formules spécifiques aux espèces (comme Cornell et surface corporelle), afin de réaliser des mesures et rapports professionnels.


Large bibliothèque d'annotations et de repères anatomiques

Avec plus de 200 repères anatomiques et plus de 120 annotations couvrant les petits animaux, les chevaux, les animaux de rente et les espèces exotiques, le logiciel offre des fonctionnalités complètes pour un diagnostic précis et spécialisé.

Il inclut plus de 20 espèces afin de répondre à un large éventail de besoins vétérinaires.

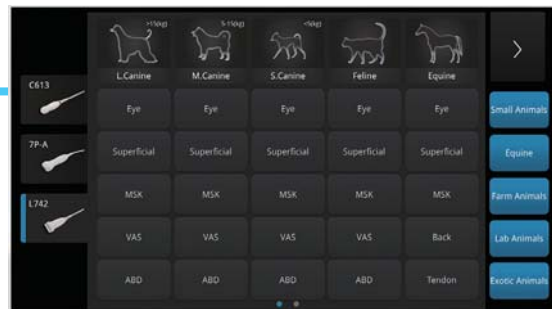


Réglages prédéfinis pour toutes les espèces animales

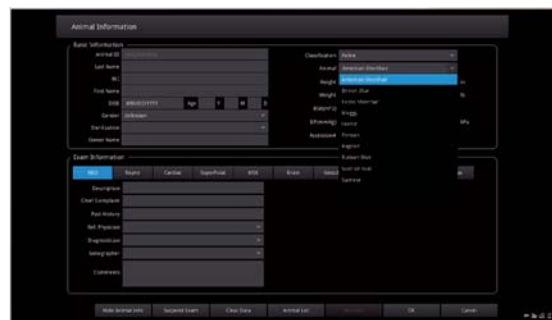

Saisie des données du patient



Création individuelle de la classification des animaux

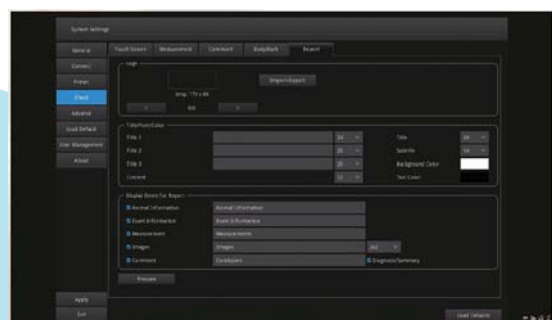

Génération de rapport



OR 4Vet

L'imagerie diagnostique
multimodale qui vous inspire.

Solution complète : PACS | Radiographie | Échographie | CT
OR 4Vet. Parce que l'imagerie diagnostique n'a besoin
que d'un seul partenaire.

Headquarters: OR Technology (Oehm und Rehbein GmbH), 18057 Rostock, Germany,
Neptunallee 7c, www.or-technology.com

OR Technology UK: Celtic SMR Ltd., Frederick House, Hayston View, Johnston
Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 3AQ, United Kingdom, www.celticsmr.co.uk


OR Technology Irlande : VetEquip Ltd., Unit C1, Clane Business Park, College Road, Clane,
Co. Kildare, W91 VK84, Irlande, www.vetequip.ie

OR Technology France:

info@or4vet.fr

Contact: +33 5 23 65 1000

www.or4vet.fr

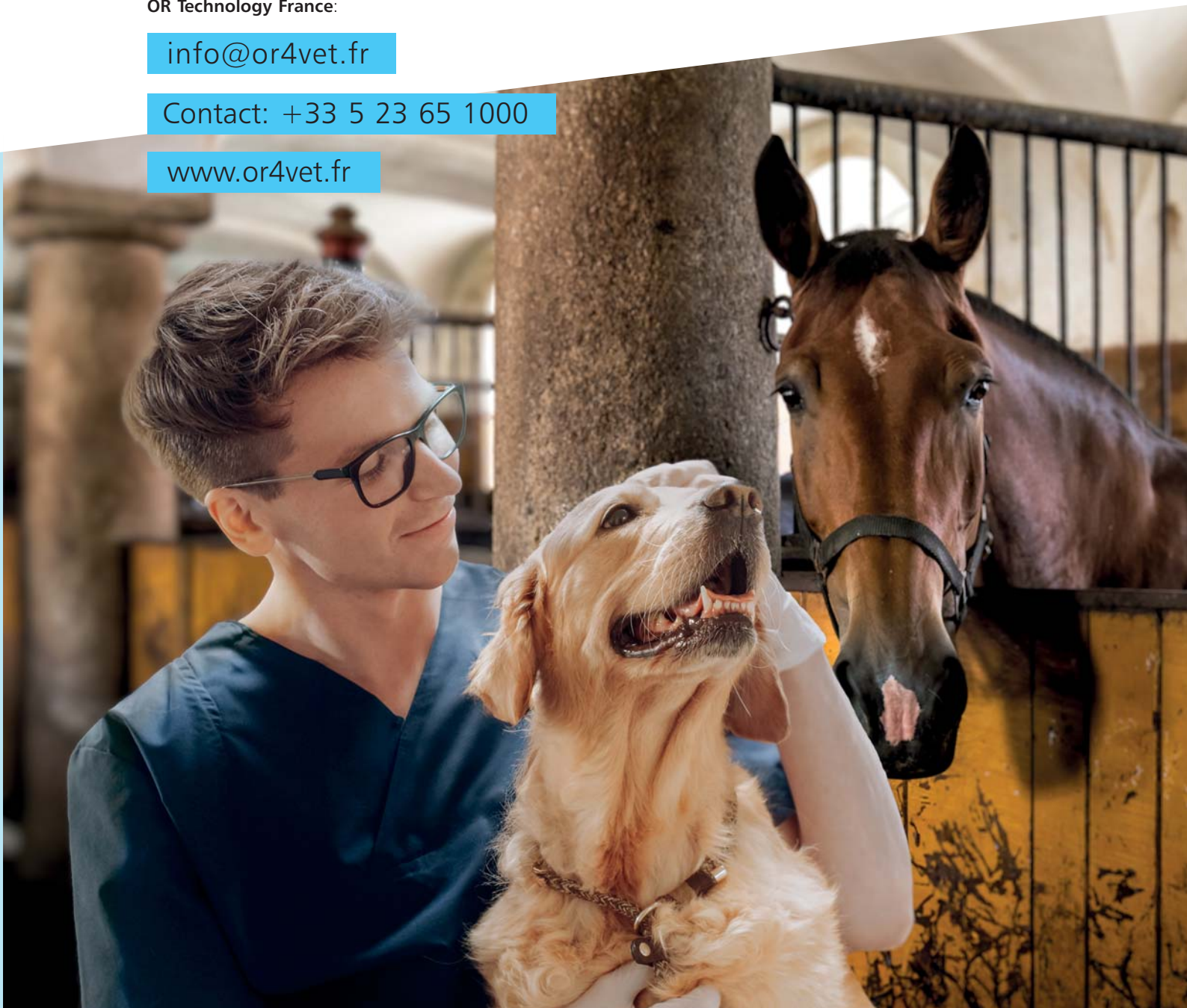

« Sous réserve de modifications techniques. »

L'éditeur s'efforce de fournir des informations exactes et à jour. Les spécifications indiquées se fondent sur l'état actuel des connaissances et peuvent être modifiées sans préavis. Cette brochure est susceptible de corrections. L'éditeur n'assume aucune responsabilité quant à l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des

informations. Tous les logos, images et graphiques fournis sont la propriété de leurs titulaires respectifs et sont protégés par le droit d'auteur. Toute utilisation, diffusion, distribution ou reproduction des images, logos ou textes compilés ou traités par l'éditeur est soumise à notre consentement écrit. Tous droits réservés.