



OR 4Vet

L'imagerie diagnostique
multimodale qui vous inspire.

ORsono professional V70 Système d'échographie Doppler couleur


Configuration personnalisable – pour l'ensemble du spectre de la médecine vétérinaire



 **OR Technology**

IMAGERIE DIAGNOSTIQUE INSTANTANÉE.

Le joyau parmi les échographes mobiles

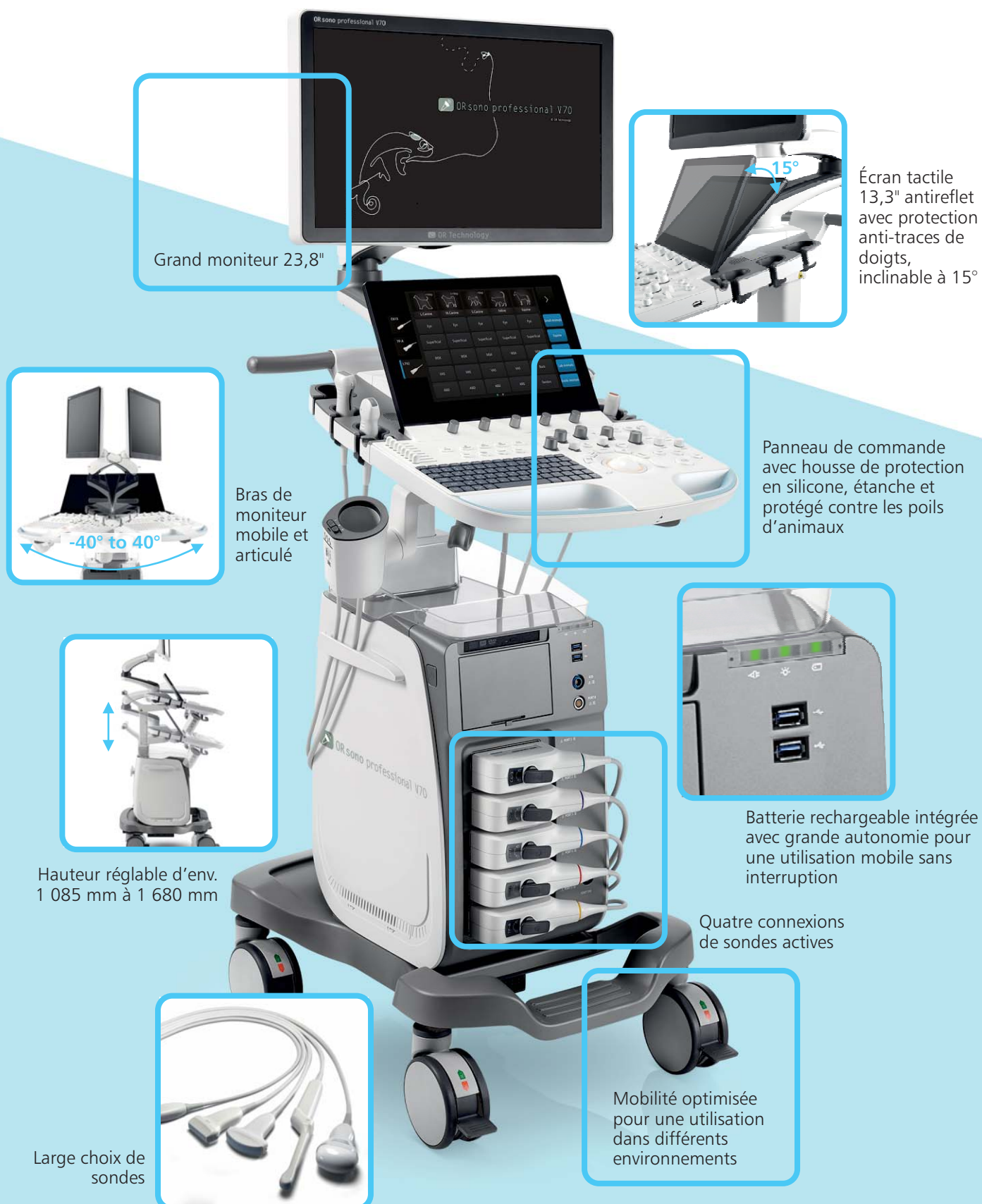

Caractéristiques de la solution d'échographie configurable individuellement

Données techniques

Dimensions du système :

Hauteur : 1 360 mm à 1 680* mm

Largeur : 568 mm

Profondeur : 743 mm

Course de levage :

0 mm – 230 mm

Poids du système :

env. 83,7 kg

*Le moniteur et le panneau de commande sont en position haute.

Device specification

Grand moniteur orientable

- Réglable en hauteur : env. 1 085 mm à 1 680 mm
- Avec housse de protection en silicone, protégé contre les poils d'animaux

Panneau de commande

- Réglable en hauteur : env. 1 085 mm à 1 680 mm
- Avec housse de protection en silicone, protégé contre les poils d'animaux

Écran tactile inclinable


Écran tactile 13,3" antireflet avec protection anti-traces de doigts, inclinaison possible jusqu'à 15°

Quatre ports de connexion pour sondes

Gain de temps et d'énergie grâce à la suppression des changements fréquents de sonde

Batterie haute performance intégrée

Associé à la technologie de sondes monocristal, il fournit des images d'excellente qualité et garantit un diagnostic précis dans les plus brefs délais.

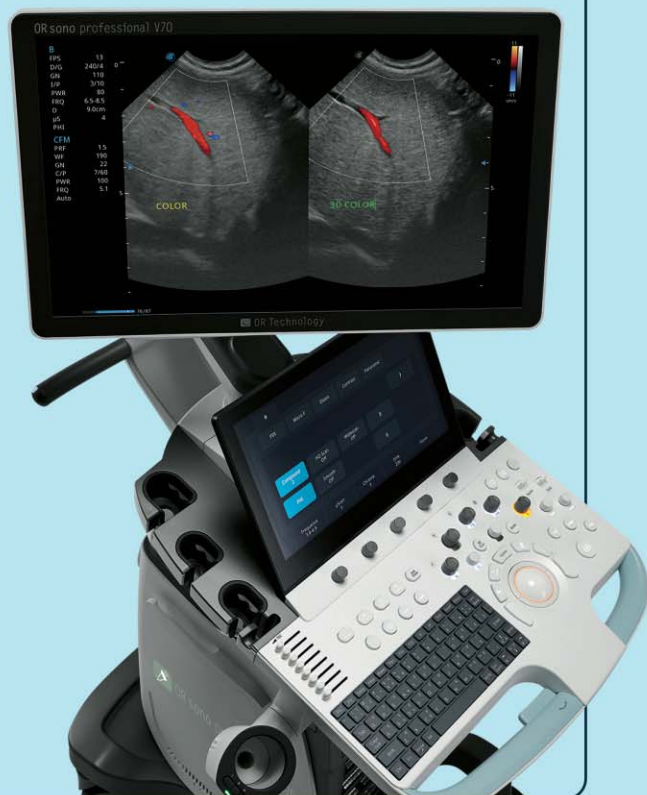

Logiciel vétérinaire intelligent et intuitif


Associé à la technologie de sondes monocristal, il fournit des images d'excellente qualité et garantit un diagnostic précis dans les plus brefs délais.

Des images impressionnantes & une utilisation sophistiquée

Excellente qualité d'image

L'ORsono professional V70 associe un logiciel de pointe à une technologie innovante de sondes monocristal afin de garantir une visualisation d'image optimale.

Même les structures pathologiques les plus fines sont représentées avec précision, aussi bien chez les grands chiens que chez les petits animaux exotiques, contribuant ainsi à une amélioration significative des résultats cliniques.

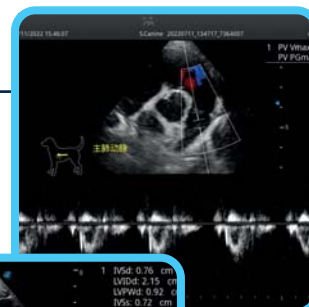


Processus efficaces

- Options de connectivité avancées pour une intégration transparente dans les systèmes de gestion du cabinet
- Transfert d'images rapide et pratique entre l'échographe et les appareils intelligents
- Assistant intégré guidant l'utilisateur tout au long de l'examen et proposant un protocole de scan personnalisable pour optimiser le flux de travail et renforcer la
- Connexion simple à des appareils intelligents, ordinateurs portables ou systèmes d'échographie externes pour des téléconsultations et l'obtention d'un second avis
- Caractéristiques ergonomiques pour des processus fluides :
 - Panneau de commande réglable en hauteur pour un travail confortable
 - Grand rayon de rotation du bras de moniteur monté de manière flexible sur deux axes, s'adaptant à vos besoins changeants

Sondes disponibles pour la médecine des petits animaux et équine

- Sonde convexe
- Sonde linéaire
- Sonde sectorielle (phased array)
- Sonde « hockey stick »
- Sonde endo-linéaire

Autres sondes disponibles sur demande !

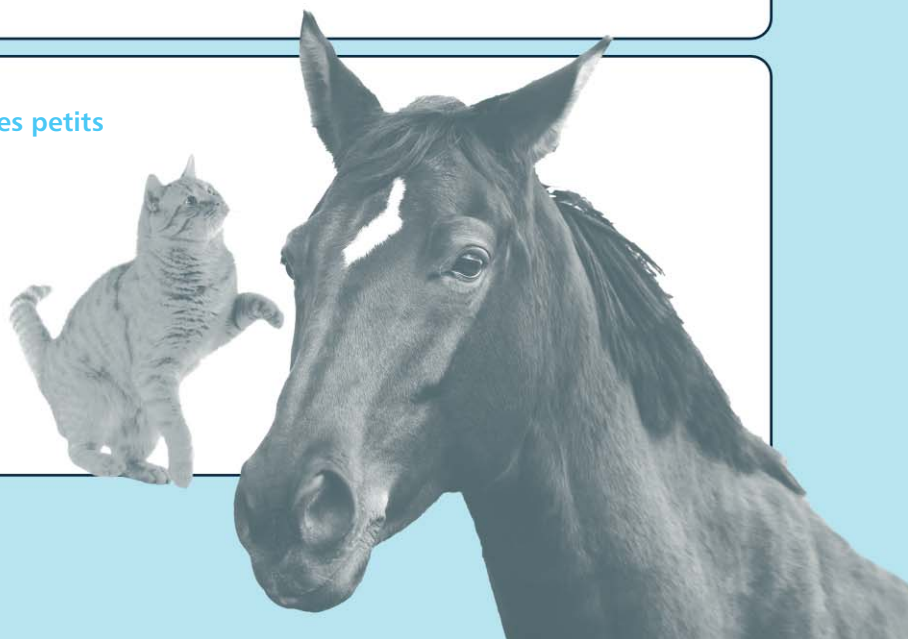


Logiciel d'échographie professionnel pour la médecine vétérinaire

Utilisation intuitive et diagnostic rapide pour les vétérinaires

Le logiciel spécialement conçu pour les vétérinaires est très simple à utiliser.


Le mode d'examen vétérinaire, flexible et intuitif, permet de sélectionner en un seul clic l'espèce animale, la sonde et les combinaisons de préréglages souhaitées à partir d'une liste.

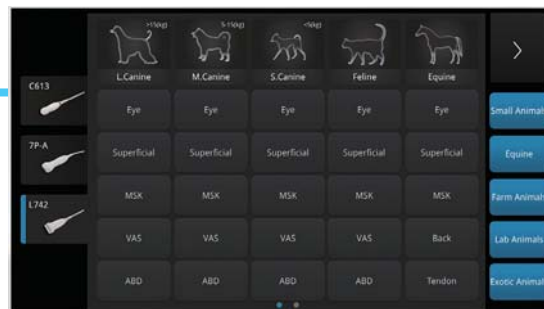

Réglages prédéfinis pour toutes les espèces animales

Interface dédiée pour la saisie des données patient

Le logiciel est spécialement développé pour le secteur vétérinaire et offre une interface conviviale pour la saisie des informations des patients.

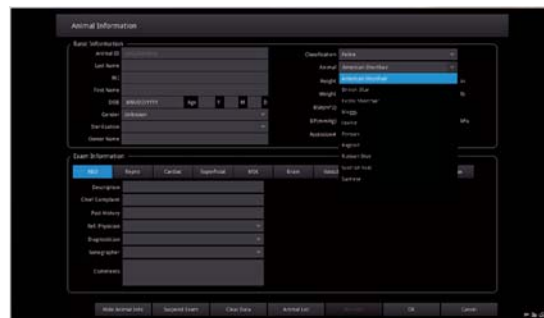

Saisie des données du patient

Classification des espèces personnalisable

Le logiciel permet aux vétérinaires de définir, dans les paramètres du système, l'espèce animale et l'icône graphique d'examen correspondante pour une application vétérinaire donnée.

Mesures et comptes rendus vétérinaires professionnels

Le logiciel couvre de nombreux domaines d'application, tels que la reproduction, le cœur et l'appareil locomoteur. Il met à disposition tous les outils nécessaires, y compris des formules spécifiques aux espèces (comme Cornell et surface corporelle), afin de réaliser des mesures et rapports professionnels.




Création individuelle de la classification des animaux

Large bibliothèque d'annotations et de repères anatomiques

Avec plus de 200 repères anatomiques et plus de 120 annotations couvrant les petits animaux, les chevaux, les animaux de rente et les espèces exotiques, le logiciel offre des fonctionnalités complètes pour un diagnostic précis et spécialisé.

Il inclut plus de 20 espèces afin de répondre à un large éventail de besoins vétérinaires.

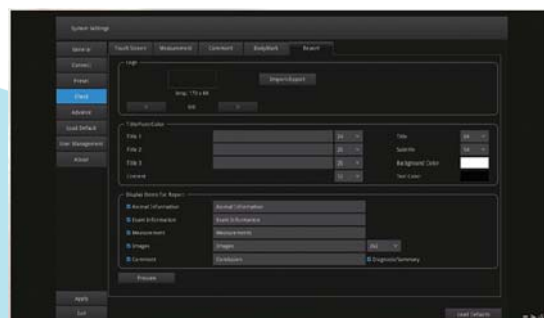

Génération de rapport



OR 4Vet

L'imagerie diagnostique
multimodale qui vous inspire.

Solution complète : PACS | Radiographie | Échographie | CT
OR 4Vet. Parce que l'imagerie diagnostique n'a besoin
que d'un seul partenaire.

Headquarters: OR Technology (Oehm und Rehbein GmbH), 18057 Rostock, Germany,
Neptunallee 7c, www.or-technology.com

OR Technology UK: Celtic SMR Ltd., Frederick House, Hayston View, Johnston
Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 3AQ, United Kingdom, www.celticsmr.co.uk

OR Technology Irlande : VetEquip Ltd., Unit C1, Clane Business Park, College Road, Clane,
Co. Kildare, W91 VK84, Irlande, www.vetequip.ie

OR Technology France:

info@or4vet.fr

Contact: +33 5 23 65 1000

www.or4vet.fr



« Sous réserve de modifications techniques. »

L'éditeur s'efforce de fournir des informations exactes et à jour. Les spécifications indiquées se fondent sur l'état actuel des connaissances et peuvent être modifiées sans préavis. Cette brochure est susceptible de corrections. L'éditeur n'assume aucune responsabilité quant à l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des

informations. Tous les logos, images et graphiques fournis sont la propriété de leurs titulaires respectifs et sont protégés par le droit d'auteur. Toute utilisation, diffusion, distribution ou reproduction des images, logos ou textes compilés ou traités par l'éditeur est soumise à notre consentement écrit. Tous droits réservés.