



OR 4Vet

Multimodale Bilddiagnostik,
die begeistert.

Leonardo DR compact III™

Der leichte Röntgenkoffer

Jahrzehntelange Erfahrung – gebündelt in einer mobilen Lösung

**Mehr Mobilität.
Mehr Effizienz.
Mehr Präzision.**



 **Oehm** und **Rehbein**

INSTANT DIAGNOSTIC IMAGING.

Mehr Mobilität. Mehr Effizienz. Mehr Präzision.

Kompakt und überall dabei

Leichtes, kleines Format für einfachen Transport und schnellen Aufbau direkt im Stall oder auf der Weide

ORCA® Cloud

Ihre Bilder – zu jeder Zeit und an jedem Ort

Cloudbasierte Archivierung und Zugriff, Befund- und Bildfreigabe für Kollegen oder Kunden von jedem Ort aus

Perfekt für den Outdoor-Einsatz

Spritzwassergeschützt, stoßdämpfend, High-tech-Verbundmaterial für maximale Haltbarkeit unter Stall- und Außenbedingungen

Entspiegelter Full HD-Touchscreen-Monitor für reduzierte Reflexionen und scharfe Bilder

Immer verbunden – auch im Außeneinsatz

Direkte mobile Datenverbindung für Sofort-Upload, Fernbefundung und digitale Kommunikation

Stauraum für Zubehör für perfekte Organisation und Ordnung

Servicepaket OR 4Vet Extended Care für maximale Verfügbarkeit und Konnektivität (inkludiert komplette Hardware, Software, Cloud und mobile Internetanbindung)

Kristallklare Bilder – sofort verfügbar

Bewährte Bildverarbeitungstechnologie für gestochen scharfe, detailreiche und sofort verfügbare Aufnahmen.

Hochwertiger Laptop für performante Bildverarbeitung

Statusanzeige des Gesamtsystems in 4 Farben zur direkten Visualisierung des Arbeitsablaufes

Zusätzliche Lademöglichkeit mit USB-C Car Charger für ein bequemes Laden im Auto

Zuverlässige Nutzung für den ganzen Tag

Integriertes Smart Power-Konzept, flexible Ladezyklen und USB-C-Ladung für bis zu 10 Stunden Laufzeit

Einfache Entnahme des Röntgendetektors inkl. Protection-box aus dem gepolsterten Transportfach





Leonardo DR compact III




Professionelle Akquisitions- und Befundsoftware

Maßgeschneiderte Software-Lösung für Pferdeärzte „Made in Germany“

Unschlagbare Bildqualität

durch automatisches, intelligentes Bild-processing

Perfekter Workflow

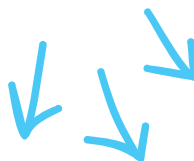

Kabellose Fernbedienung
des Systems per App
über Ihr Smartphone



Digitale Kaufuntersuchung

der Gesellschaft für Pferdemedizin: lückenlose Dokumentation von der klinischen Untersuchung bis zum Röntgenbefund mit integriertem Röntgen-Leitfaden (optional)
gpm-vet.de/de/shop/category/21-kaufuntersuchung-digital

Problemlose
Anbindung an
alle gängigen
Patientenver-
waltungs-
systeme

Intuitive Bedienung
per **Touchscreen**
garantiert ein
schnelles und
effizientes Arbeiten

Integrierter Röntgenhelfer

mit Einstelltechnik,
Hinweisen und
Bildmaterial für jede
Untersuchung

Integrierter, vollwertiger Viewer
für professionelle
Befundung der
Röntgenbilder

Spezial-
vermessungen
und Makros für
wiederkehrende
Untersuchungen
(z. B. Hufrehe,
Kaufuntersuchung)

Hier finden Sie die
komplette Übersicht
der Features der
Akquisitionssoftware:



Standardkomponenten des Röntgenkoffers

Kompakter und leichter Röntgenkoffer

- Gesamtgewicht nur ca. 6,76 kg (inkludiert kompletten Röntgenkoffer, Notebook, Netzteil und Elektronik)
- Maße: ca. 520 x 400 x 198 mm
- inkl. Trageriemen
- Hochwertiges Notebook für performante Bildverarbeitung
- Smart Power-Konzept – zuverlässige Nutzung für einen ganzen Einsatztag
- Kabellose Steuerung des digitalen Röntgensystems mit der App „dicomPACS® DX-R remote control“ über Smartphone oder Tablet inkl. Anzeigen der Arbeitsliste, Vorschau des aufgenommenen Bildes zur Überprüfung der Aufnahme etc. – direkt aus der App kann ein Schuss wiederholt oder ein neuer geplant werden



Video zur kabellosen Fernbedienung des Systems über Ihr Smartphone (per App) unter www.oehm-rehbein.de/DX-R-remote-control-video-vet-de



Röntgendetektoren - Sie wählen Größe und Qualität:

NexOR 2530FAW-flex

Kabelloser Röntgendetektor (1,7 kg) mit 99 µm Pixeldichte, hohem DQE, unzerbrechlichem TFT ohne Glas, geringem Gewicht, Sturzfestigkeit bis 1,5 m


small



NexOR 3643FAW-flex

Kabelloser Röntgendetektor mit 99 µm Pixeldichte, hohem DQE, unzerbrechlichem TFT ohne Glas, geringem Gewicht, Sturzfestigkeit bis 1,5 m

large

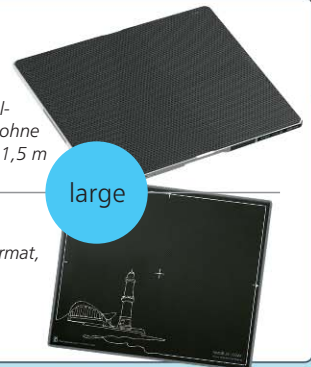

XenOR 33-100W-flex

Kabelloser Röntgendetektor mit flexiblem Substrat – nahezu unzerstörbar, reduziertes Gewicht (2 kg), 100 µm Pixeldichte, schmale Ränder von nur ca. 7 mm an 2 Seiten

XenOR 35-100WF

Kabelloser Röntgendetektor im Kassettenformat, Batterielaufzeit von mehr als 8 Stunden, automatische Belichtungserkennung (AED), Gewicht (3,7 kg), Pixeldichte von 100 µm

Leonardo DR compact III-Softwarepaket

- **dicomPACS® DX-R**, der professionellen Konsolensoftware mit moderner grafischer Bedienoberfläche mit Basis-Softwareausstattung und integriertem Röntgenhelfer zur korrekten Einstelltechnik für jede Untersuchung
- **ORCA® Cloud*** für cloudbasierte Archivierung und Zugriff, Befund- und Bildfreigabe für Kollegen oder Kunden zu jeder Zeit an jedem Ort



Amadeo P Hochfrequenz-Röntgengerät

Tragbares Monoblock-Röntgengerät für hochwertige Röntgenaufnahmen: Geringes Gewicht und einfache Bedienung garantieren vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Kleintierpraxis und Pferdeklänik

Verschiedene Generatortypen auf Anfrage



Wireless-Synchronisation für beliebige Röntgeneratoren

Halterungen für Smartphone

Zwei Halterungstypen für die Aufnahme und Betrachtung von Bildern stehen zur Auswahl: Armhalterung bzw. Halterung für den tragbaren Röntgengenerator



Servicepaket OR 4Vet Extended Care (Mindestvertragslaufzeit 3 Jahre)

Die Servicepakete umfassen das gesamte Röntgensystem, einschl. Detektor und Röntgenstrahler:**

Core: Konnektivitätspaket + Software-Service für dicomPACS® DX-R (Fernwartung + Zugang zur OR Servie-Hotline)
optional: Ersatzgerät bei Systemausfall, 1 x präventive Wartung pro Jahr

Pro: wie Paket Core inkl. 50GB Speicherplatz in der ORCA® Cloud

Elite: wie Paket Pro inkl. Ersatzgerät bei Systemausfall, 1 x präventive Wartung pro Jahr

Optionale Komponenten für das Leonardo DR compact III-System

Protectionbox für 10" x 13" und 14" x 17" Detektoren

Schutzgehäuse mit Handgriff



Transporttasche für 14" x 17" Detektor



* Nur bei Servicepaket Pro und Elite enthalten

** Gilt nur, wenn das gesamte System gleichzeitig gekauft wird; das Angebot ist auf die Einführungsphase begrenzt.



OR 4Vet

Multimodale Bilddiagnostik,
die begeistert.

Alles aus einer Hand: PACS | Röntgen | Ultraschall | CT OR 4Vet. Weil Bilddiagnostik nur einen Partner braucht.

Unternehmenszentrale: Oehm und Rehbein GmbH, Neptunallee 7c,
18057 Rostock, Germany, www.oehm-rehbein.de

OR Technology UK: Celtic SMR Ltd., Frederick House, Hayston View, Johnston
Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 3AQ, United Kingdom, www.celticsmr.co.uk

OR Technology Irland: VetEquip Ltd., Unit C1, Clane Business Park, College Road,
Clane, Co. Kildare, W91 VK84, Irland, www.vetequip.ie

info@or4vet.de

Info-Hotline: +49 381 36 600 600

www.or4vet.de



Technische Änderungen vorbehalten.

Der Herausgeber ist um Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen bemüht. Die Angaben über technische Inhalte basieren jedoch auf den aktuellen Erkenntnissen und unterliegen der ständigen Weiterentwicklung. Der Herausgeber übernimmt deshalb allein auf Basis dieser Werbedrucksache keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen.

Alle dargestellten Logos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der entsprechenden Firmen und unterliegen dem Copyright der entsprechenden Lizenzgeber. Sämtliche auf diesen Seiten dargestellten Fotos, Logos und Texte, die Eigenentwicklungen von uns sind oder von uns aufbereitet wurden, dürfen nicht ohne unser Einverständnis kopiert oder anderweitig genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten.

OR 4Vet Extended Care

Maximale Verfügbarkeit und Konnektivität

Unser Serviceprogramm sorgt für **höchste Systemverfügbarkeit**, **minimiert Ausfallzeiten** und bietet Ihnen **volle Kostentransparenz**.

Dank Cloud-Datenspeicher und mobiler Internetverbindung haben Sie Ihre Bilddaten jederzeit sicher und standortunabhängig im Zugriff – für einen reibungslosen Arbeitsablauf.

Leonardo DR compact III

- Jedes Röntgensystem wird mit einem verbindlichen Servicevertrag geliefert.
- Unsere drei Servicepakete umfassen das gesamte Röntgensystem, einschließlich Detektor und Röntgenstrahler.*

** Gilt nur, wenn das gesamte System gleichzeitig gekauft wird; das Angebot ist auf die Einführungsphase begrenzt.*



	Core Für aktuelle ORCA® Nutzer	Pro Kunden-Favorit	Elite Premium Sicherheit
Garantiezeitraum	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Konnektivitätspaket	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
ORCA®	-	50 GB	50 GB
Software-Service	✓	✓	✓
Fernwartung /	✓	✓	✓
Zugang zur OR-Service-Hotline			
Ersatzgerät bei Systemausfall	○	○	✓
jährliche vorbeugende Wartung*	○	○	✓

* Obligatorische Inbetriebnahme-Wartung

✓ Inklusive ○ optional - nicht verfügbar

 **Oehm Rehbein**

INSTANT DIAGNOSTIC IMAGING.

Unternehmenszentrale: Oehm und Rehbein GmbH, 18057 Rostock, Germany, Neptunallee 7c
Info-Hotline: +49 381 36 600 600, www.oehm-rehbein.de, info@oehm-rehbein.de
OR Technology UK: Celtic SMR Ltd., Frederick House, Hayston View, Johnston, Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 3AQ, United Kingdom, www.celticsmr.co.uk, sales@celticsmr.co.uk
OR Technology Irland: VetEquip Ltd., Unit C1, Clane Business Park, College Road, Clane, Co. Kildare, W91 VK84, Irland, www.vetequip.ie

Info-Hotline: +49 381 36 600 600

www.or4vet.de