



OR 4Vet


L'imagerie diagnostique
multimodale qui vous inspire.

Divario CR-F Dental Premium

Système de radiographie numérique

Système dentaire rapide et économique pour des images numériques de haute qualité

Plaques d'imagerie
intra-orales :
4 × taille 2
1 × taille 4c
1 × taille 4

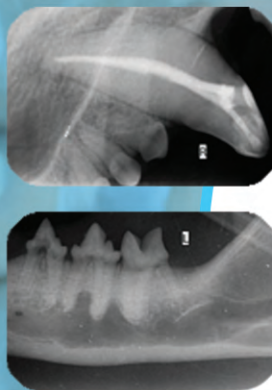

 OR Technology

IMAGERIE DIAGNOSTIQUE INSTANTANÉE.

Système dentaire CR premium

Le Divario CR-F Dental Premium est un système rapide et économique qui fournit des images numériques de haute qualité. En plus du jeu de plaques d'imagerie standard, il comprend une plaque de taille 4. Compact et abordable, il améliore la productivité dans les cabinets et cliniques vétérinaires. Ce lecteur dentaire associe un design élégant à un système performant et convivial.

Un plateau d'alimentation automatique pour un fonctionnement « push and go » ainsi qu'une gamme complète de plaques d'imagerie intra-orales et interproximales réutilisables, faciles et rapides à positionner, rendent le système Divario parfaitement abouti. Le logiciel *dicomPACS*® DX-R inclus (en option) permet de contrôler le générateur de rayons X et garantit un flux de travail efficace.

- **Résolution jusqu'à 21 lp/mm**
- Rapide et compétitif en termes de coût
- Convivialité maximale et qualité d'image optimale
- Plateau d'alimentation automatique pour un fonctionnement « push and go »
- Plaques d'imagerie intra-orales réutilisables
- Pilote logiciel *dicomPACS*® DX-R inclus

Spécification

Taille de pixel sélectionnable :	Standard : 64 µm, Haute : 35 µm (résolution jusqu'à 21 lp/mm)
Temps de lecture :	4,1 à 25 s
Résolution :	Acquisition des données : 16 bits par pixel, 65 000 niveaux de gris
Dimensions (H x L x P) :	268 (H) x 124 (L) x 351 (P) mm
Poids :	12,1 lbs (5,4 kg)
Configuration du système :	Sur table
Interface :	USB 2.0 haute vitesse (480 Mbps) / Ethernet (100 Mbps)
Alimentation :	100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz, 30W, onduleur requis
Conditions de fonctionnement :	
Température :	59-86 Fahrenheit (15-30 Celsius)
Humidité :	15%-95% RH
Champ magnétique :	max. 1260 microteslas

Tailles de capteurs

Taille	Standard	Haute
0 (22 x 31 mm)	343 x 484 pixels	628 x 885 pixels
1 (24 x 40 mm)	375 x 625 pixels	685 x 1143 pixels
2 (31 x 41 mm)	484 x 640 pixels	886 x 1171 pixels
3 (27 x 54 mm)	421 x 843 pixels	771 x 1542 pixels
4c (48 x 54 mm)	750 x 843 pixels	1370 x 1542 pixels
4 (76 x 54 mm)	1187 x 843 pixels	2170 x 1542 pixels



Sous réserve de modifications techniques.

L'éditeur s'efforce de garantir l'exactitude et l'actualité des informations fournies. Toutefois, les données techniques reposent sur l'état actuel des connaissances et sont susceptibles d'évoluer en permanence. L'éditeur ne peut donc, sur la seule base de ce document publicitaire, garantir l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité des informations mises à disposition. Tous les logos, images et graphiques présentés sont la propriété des sociétés concernées et sont protégés par les droits d'auteur de leurs titulaires de licence respectifs. Toutes les photos, logos et textes figurant dans ces pages, qui sont nos propres créations ou ont été préparés par nos soins, ne peuvent être copiés ou utilisés de quelque manière que ce soit sans notre accord préalable. Tous droits réservés.