



OR 4Vet

L'imagerie diagnostique
multimodale qui vous inspire.

Appareil de radiographie ultraléger, fonctionnant sur batterie **Amadeo P-90/20VB**

L'Amadeo P-90/20VB est l'un des appareils de radiographie mobiles les plus légers du marché, fonctionnant aussi bien sur batterie que sur secteur. La nouvelle technologie de batterie innovante permet de réaliser jusqu'à 300 clichés avec une charge complète.

Avec un poids d'environ 7,2 kg et un double laser, l'Amadeo P-90/20VB se présente comme un appareil de radiographie portable extrêmement léger, intelligent et durable. Le générateur haute fréquence garantit une puissance de sortie élevée et des images cliniques d'une grande qualité. Une commande bien conçue assure un retour stable des valeurs mA et kVp, sans erreurs même en cas d'expositions fréquentes.

- Compatible avec l'alimentation secteur et le fonctionnement sur batterie
- Grande capacité de la batterie permettant jusqu'à 300 clichés par charge complète
- Remplacement de la batterie simple et rapide
- Batterie lithium-polymère, temps de charge d'environ 180 minutes
- Dimensions : 203 × 174 × 307 mm
- Poids : 7,2 kg (batterie incluse)



OR Technology

IMAGERIE DIAGNOSTIQUE INSTANTANÉE.

Appareil de radiographie ultraléger, fonctionnant sur batterie **Amadeo P-90/20VB**

Contenu de la livraison

- Appareil de radiographie Amadeo P-90/20VB
- 1 batterie et chargeur de batterie
- Valise de transport adaptée et robuste
- Déclencheur manuel à deux niveaux

Description courte

- L'appareil peut fonctionner avec une batterie interne ou via une alimentation externe
- Approche innovante grâce à la haute performance de la batterie lithium-ion polymère
- Jusqu'à 300 clichés avec une seule charge de batterie
- Protection optimale contre les chocs et les contaminations extérieures
- Télécommande possible via le déclencheur manuel

Caractéristiques techniques



Puissance de sortie	1.6 kW (800W)
Batterie	Lithium-ion polymère
Plage kV pour la radiographie	20 mA (50 ~ 80 kV / 0,4 ~ 3,2 mAs) 10 mA (50 ~ 80 kV / 3,6 ~ 20 mAs) 15 mA (81 ~ 90 kV / 0,4 ~ 3,2 mAs) 8 mA (81 ~ 90 kV / 3,6 ~ 20 mAs)
Plage mAs	0,4 ~ 20 mAs en 25 paliers
Déviat ion maximale du kV	±1%
Déviat ion maximale du mAs	±3%
Indication	kV (code erreur) / mAs : affichage LED à 7 segments
Tube à rayons X	Point focal : 1,2 mm × 1,2 mm Angle de cible : 19° Capacité thermique de l'anode : 10 kJ
Filtration totale	2.5 mm Al eq. @ 90 kV
Collimateur	Type à double fente, fonctionnement manuel Champ de rayonnement : 35 cm × 35 cm @ 65 cm SID Pointeur laser : > 1 mW, double laser (classe 2) Éclairage par bouton-poussoir avec minuterie de 30 s Lampe : LED 3,3 V
Logiciel	Mémoire APR : 15 programmes (combinaison de 5 touches) Logiciel de commande à distance infrarouge et commande à distance via déclencheur manuel
Poids net	6,8 kg (15 lbs) sans batterie

Pour plus d'informations, rendez-vous sur **www.or4vet.fr**

Spécifications sous réserve de modifications sans préavis

L'éditeur s'efforce de fournir des informations exactes et à jour. Les spécifications indiquées sont basées sur l'état actuel des connaissances et peuvent être modifiées sans préavis. Cette brochure est susceptible d'être corrigée. L'éditeur décline toute responsabilité quant à l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies. Tous les logos, images et graphiques mis à disposition sont la propriété de leurs sociétés respectives et sont soumis aux droits d'auteur du concédant de licence. L'utilisation, la diffusion, la distribution ou la reproduction des images, logos ou textes compilés ou traités par l'éditeur est soumise à notre accord écrit. Tous droits réservés.

Siège social : OR Technology (Oehm und Rehbein GmbH), Neptunallee 7c, 18057 Rostock, Allemagne, www.or-technology.com
OR Technology UK : Celtic SMR Ltd., Frederick House, Hayston View, Johnston, Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 3AQ, Royaume-Uni, www.celticsmr.co.uk
OR Technology Irlande : VetEquip Ltd., Unit C1, Clane Business Park, College Road, Clane, Co. Kildare, W91 VK84, Irlande, www.vetequip.ie

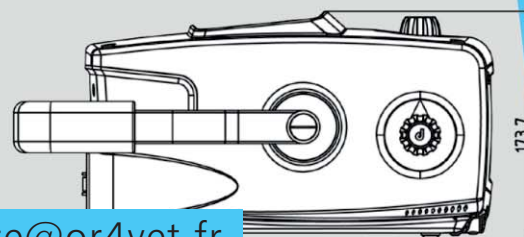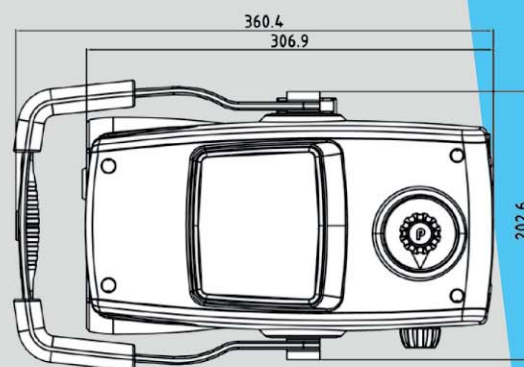

france@or4vet.fr

Contact : +33 5 23 65 1000

www.or4vet.fr